

INSTRUÇÕES DE USO

Eletrocardiógrafo Bionet Cardiocare 2000

Cuidados e limpeza:


- Mantenha o equipamento conectado a rede elétrica, mesmo quando não estiver em uso;
- Para limpeza, utilize pano umedecido com detergente neutro ou álcool 70º e jamais aplique o produto diretamente no equipamento;
- Realize a limpeza dos cabos e acessórios e mantenha-os guardados quando não estiver em uso;

Verifique se o **Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet** está conectado à energia elétrica, ou avalie se a carga da bateria poderá ser suficiente para o exame. Ligue o equipamento, através da chave liga/desliga. Ao ligar, o **Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet** informa rapidamente a versão do sistema e após, fica pronto para utilização.


Insira os dados do paciente no campo ID, se necessário.

Prepare o paciente e siga o protocolo da sua instituição para os procedimentos de exame do eletrocardiograma. Após colocar o paciente confortavelmente em uma cama, certifique-se de que o paciente esteja relaxado e seus membros não estejam tocando o corpo, paredes, alças metálicas ou objetos que possam causar interferências elétricas. Conecte o cabo de exame (Cabo paciente 10 vias) ao paciente após limpar as partes do corpo relacionadas com o procedimento, usando álcool ou água, e após devidamente preparado, posicione e fixe todos os eletrodos. Quando for difícil colocar os eletrodos por existirem muitos pelos ou dobras no corpo, aplique gel para ECG a essas partes. O gel de ECG não pode estar espalhado pelo peito, sendo aplicado pontualmente, e deve ser removido após o uso.

- ① Linha Clavicular Central
- ② Linha Axilar Frontal
- ③ Linha Axilar Central

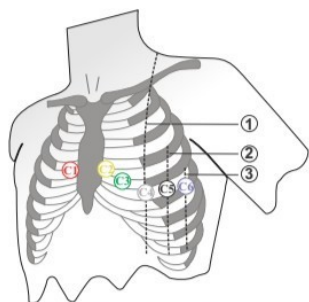


Eletrodos Precordiais

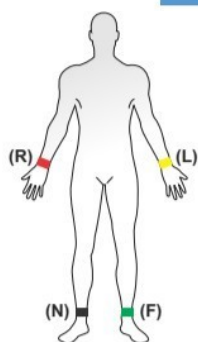

- (R) = Braço Direito
- (L) = Braço Esquerdo
- (N) = Perna Direita
- (F) = Perna Esquerda

Eletrodos de Membros

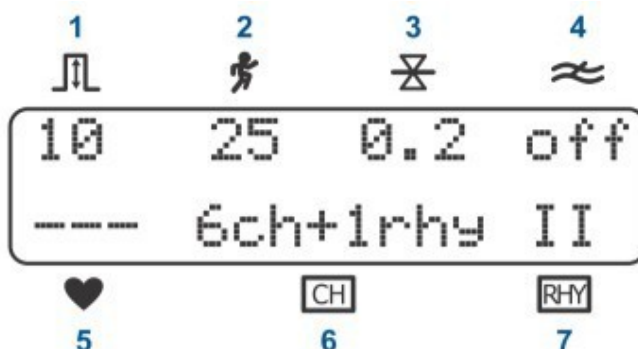

- 1 Sensibilidade (5, 10, 20, aut) "Auto Ganho", ou melhor.
- 2 Velocidade de impressão (12.5, 25, 50 ou melhor).
- 3 Filtro de Base (0.05, 0.1, 0.2, off).
- 4 Filtro Muscular (on ou off).
- 5 Cálculo da frequência cardíaca em bpm.
- 6 Formato do relatório de exame (1ch (60s), 3ch +1rhy, 6ch +1rhy ou 12ch rhy)
- 7 Canal rítmico (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 ou V6)

Em caso de falha, acione a supervisão para abertura de chamado pelo FixSystem:
app.fixcare.io/auth



O [manual](#) encontra-se disponível online.

Escaneie o QR code:
<https://x.gd/Q6zKD>

