

# INSTRUÇÕES DE USO


## Cardioversor Instramed Cardiomax 8

### Cuidados e limpeza:

- Mantenha o equipamento conectado à rede elétrica, mesmo quando não estiver em uso;
- Para limpeza, utilize pano umedecido com detergente neutro e jamais aplique o produto diretamente no equipamento;
- Verificar se as pás estão limpas e conectadas aos aparelhos;



- 1 – Botão sincronismo
- 2 – Chave seletora
- 3 – Carga
- 4 – Choque
- 5 – Menu configuração
- 6 – E-jog Control
- 7 – Troca rápida de derivação

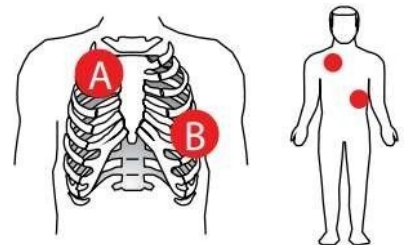

### Teste operacional:

- O teste funcional deve ser realizado diariamente;
- Gire o botão **E-jog Control** e selecione o menu configuração (pressionar E-jog Control);
- Novamente, gire o botão e selecione **“Teste Funcional”** e siga os passos descritos na tela do equipamento.

### Para desfibrilação:

- Gire a Chave seletora até o nível de energia desejado;
- Posicione as pás no paciente, conforme a ilustração (A: Pá STERNUM, B: Pá APEX);
- Pressione o Botão de carga no painel frontal do equipamento;
- Dispare pressionando os botões de choque de ambas as pás, ou no botão do painel frontal.

### Para cardioversão (sincronizado):

- Gire a Chave seletora até o nível de energia desejado;
- Pressione o Botão sincronismo (Sinc);
- Selecione a forma de captação da onda, pressionando o botão Troca rápida de derivação;
- Pressione o Botão de carga no painel frontal ou no botão de carga da pá APEX;
- Dispare pressionando os botões de choque de ambas as pás, ou no botão do painel frontal.

Em caso de falha, acione a supervisão para abertura de chamado pelo FixSystem:  
[app.fixcare.io/auth](https://app.fixcare.io/auth)



O [manual](#) encontra-se disponível online.

Escaneie o QR code:  
<https://x.gd/6p4bi>

