


INSTRUÇÕES DE USO

Desfibrilador PHILIPS Efficia DFM100


Cuidados e limpeza:

- Mantenha o equipamento conectado à rede elétrica, mesmo quando não estiver em uso;
- Para limpeza, desligue o equipamento da tomada, utilize pano umedecido com detergente enzimático neutro ou álcool 70º e jamais aplique o produto diretamente no equipamento.

Descrição Geral:

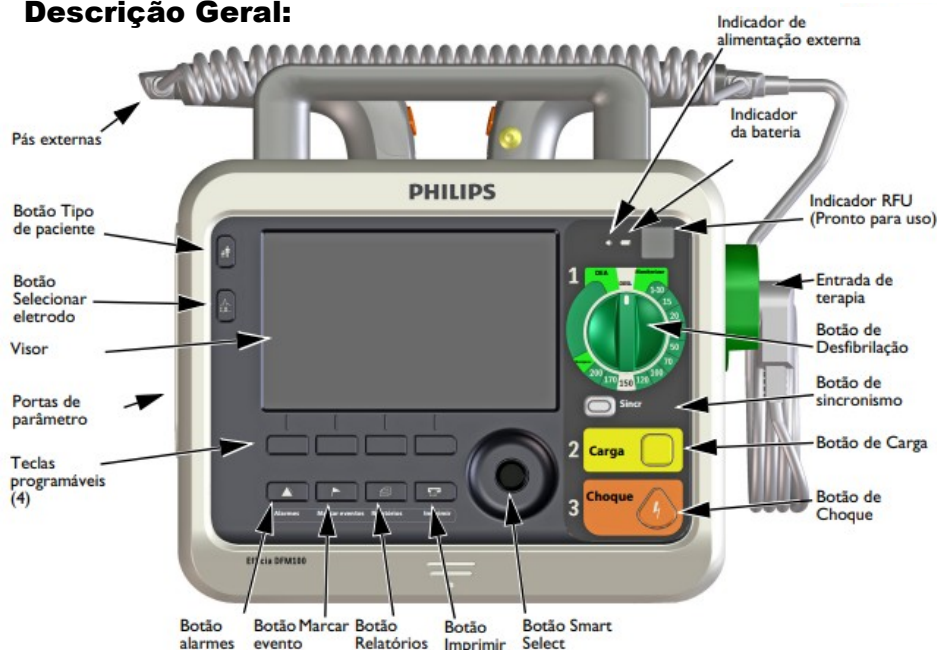

Controles de terapia

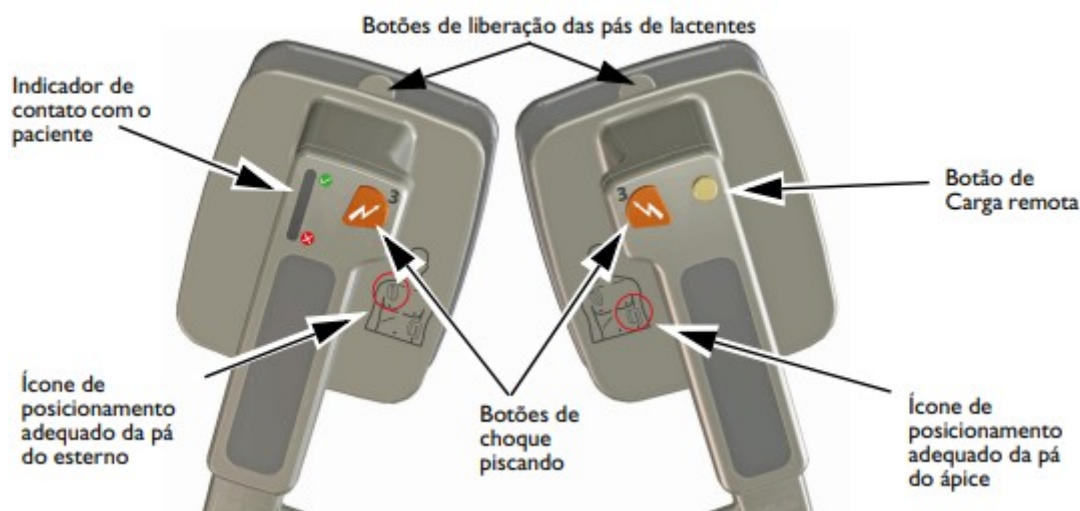

Modo de Utilização:

- Gire o **BOTÃO DE DESFIBRILAÇÃO** até o nível de energia desejado;
- Pressione o botão **SINC** (**para os casos de cardioversão**);
- Posicione as pás no paciente, conforme a ilustração (Pá STERNUM, Pá APEX);
- Pressione o **BOTÃO DE CARGA** no painel frontal do equipamento ou na PÁ.
- Dispare pressionando os **BOTÕES DE CHOQUE** de ambas as pás, ou no botão do painel frontal.

Em caso de falha, acione a supervisão para abertura de chamado pelo FixSystem:
app.fixcare.io/auth



O [manual](#) encontra-se disponível online.

Escaneie o QR code:
<https://x.gd/02bm8>



EQUIPACARE
ENGENHARIA PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS