


INSTRUÇÕES DE USO


Monitor Multiparâmetro Prolife P10

Cuidados e limpeza:

- Mantenha o equipamento conectado a rede elétrica, mesmo quando não estiver em uso;
- Para limpeza, utilize pano umedecido com detergente neutro ou álcool 70º e jamais aplique o produto diretamente no equipamento;
- Realize a limpeza dos cabos e acessórios e mantenha-os guardados quando não estiver em uso;

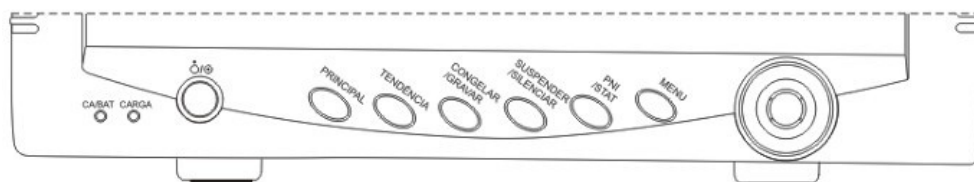

Ícones	Notas dos Ícones	Instruções de operação dos botões de função
	Luz indicadora de energia	Quando o monitor está conectado à rede elétrica, esta luz fica verde (não tem nenhuma relação com o monitor estar ligado/ desligado). Quando o monitor não está conectado à rede elétrica e a bateria é usada como fonte de energia, esta luz fica laranja.
	Luz indicadora de carga	Quando o monitor está conectado ao carregador, esta luz fica acesa. Quando o monitor estiver completamente carregado, esta luz se desligará.
	Botão Power	Aperte este botão uma vez e o monitor ligará. Aperte novamente este botão e então o monitor desligará.
	Retorna à Tela Principal	Aperte este botão uma vez para sair do menu atual e retornar à tela principal.
	Revisão de Tendências	Aperte este botão uma vez para ver o gráfico de tendências e a tabela de tendências.
	Congela (ou descongela) as curvas exibidas/ Grava em tempo real as curvas	Aperte este botão em até 2 segundos para congelar as curvas, e aperte-o novamente para descongelar. Aperte este botão por mais de 2 segundos para começar uma impressão em tempo real. Em casos onde a impressão ocorre em segundo plano, apertando este botão novamente fará com que a impressão seja concluída.
Ícones	Notas dos Ícones	Instruções de operação dos botões de função
	Suspende o som do alarme/ Para o som do alarme	Pressione este botão para pausar ou cancelar a pausa do alarme. Pressione e segure este botão por 2 segundos para silenciar o sistema de áudio do monitor ou cancelar a operação. Quando a função chamada de enfermeira está habilitada, pressionando este botão cancela a função atual do alarme.
	Iniciar/suspender Medição de PNI	Aperte o botão para acionar ou interromper a medição de PNI. Aperte o botão por mais de 2 segundos para acionar o modo contínuo de medição.
	Menu	Aperte este botão para exibir o Menu de opções.
	Botão Rotativo "Trimknob"	Gire para direita ou esquerda para mover o cursor. Aperte para realizar uma função ou para abrir um menu ou selecionar uma opção.

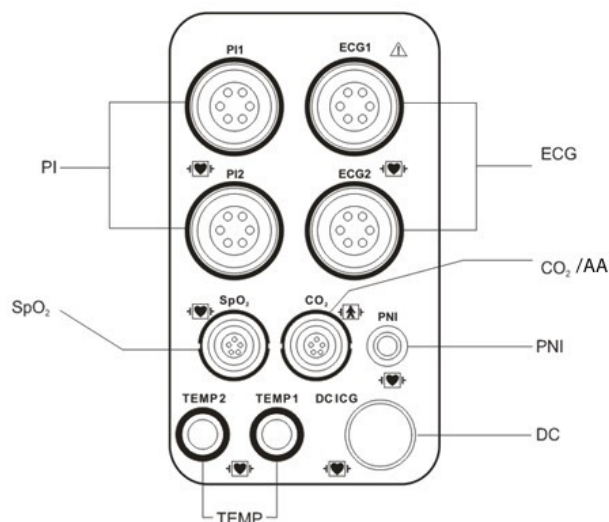

Em caso de falha,acione a Coordenação, para abertura de chamado pelo FixSystem: app.fixsystem.io/auth



O manual encontra-se disponível para consulta.

Escaneie o Qrcode: <https://x.gd/mrzxL>

