



INSTRUÇÕES DE USO

Equipamento:

Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e Alta Cirurgia, Parto e Obstetrícia, Ortopedia

Modelo: BF 683

Barrfab Indústria e Comércio Ltda.

Rua Desembargador José Bernardo de Medeiros Júnior, 1390 Bairro De Lazzer

CEP: 95055-570, Caxias do Sul – RS

CNPJ 02.836.248/0001-12 Inscr. Est. 029/0330912

Site: www.barrfab.com.br E-mail: barrfab@barrfab.com.br

Fone: (54) 3229-6774 / Fax: (54) 3229-8645



INSTRUÇÕES DE USO

PARABÉNS !

Você acaba de adquirir um equipamento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetado para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Obrigado por escolher um produto BARRFAB.

EQUIPAMENTO:

Nome técnico: Mesa Cirúrgica

Nome comercial: Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e Alta Cirurgia, Parto e Obstetrícia, Ortopedia.

Modelo comercial: BF 683

Marca: BARRFAB

Fabricante:

Barrfab Indústria e Comércio Ltda.

Rua Desembargador José Bernardo de Medeiros Júnior, 1390 Bairro De Lazzer

CEP: 95055-570, Caxias do Sul – RS

CNPJ 02.836.248/0001-12 Inscr. Est. 029/0330912

Site: www.barrfab.com.br E-mail: barrfab@barrfab.com.br

Fone: (54) 3229-6774 / Fax: (54) 3229-8645

Responsável Técnico: Antonio Paulo Nodari CREA-RS Nº 32375

Registro ANVISA nº:

ATENÇÃO

Para maior segurança:

- a) Leia e entenda todas as instruções contidas nesta Instrução de Uso antes de instalar ou operar este produto.
- b) Certifique-se de que todas as instruções estejam informadas no conteúdo deste manual.

Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto.

Este Manual foi redigido originalmente no idioma português.

Revisão do Manual: 00

CONTEÚDO:

1 – Identificação	04
1.1 – Nome e modelo	04
1.2 – Descrição do produto	04
1.3 – Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação.....	05
1.4 – Especificações e Características Elétricas	07
1.5 – Partes e acessórios acompanhantes	08
1.6 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio	08
1.7 – Especificações e Características Técnicas	08
2 - Condições especiais de armazenam., conservação e/ou manipulação do produto	09
3 - Instruções para uso do produto	11
4 - Advertências e/ou precauções a serem adotadas.....	12
5 – Desempenho do produto	12
5.1 – Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto	12
5.2 – Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações	13
5.3 – Segurança e eficácia do produto	13
6 – Instalação ou conexão a outros produtos	13
7 – Instalação, manutenção corretiva e preventiva	13
7.1 – Instalação do produto	13
7.2 – Manutenção corretiva.....	13
7.3 – Manutenção Preventiva e Conservação	14
8 – Procedimentos adicionais para reutilização	14
8.1 – Limpeza	14
8.2 – Limpeza do controle remoto	14
8.3 – Desinfecção.....	14
8.4 – Acondicionamento	14
9 – Procedimentos adicionais antes da utilização do produto	15
10 – Precauções em caso de alteração do funcionamento do produto	15
11 – Sensibilidade a condições ambientais previsíveis nas situações normais de uso	15
12 – Precauções em caso de inutilização do produto	15
13 – Termo de Garantia.....	15
14 – Termo de responsabilidade.....	16


1 – Identificação

1.1 - Nome e modelo

Nome técnico: Mesa Cirúrgica

Nome comercial: Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e Alta Cirurgia, Parto e Obstetrícia, Ortopedia.

Modelo comercial: BF 683

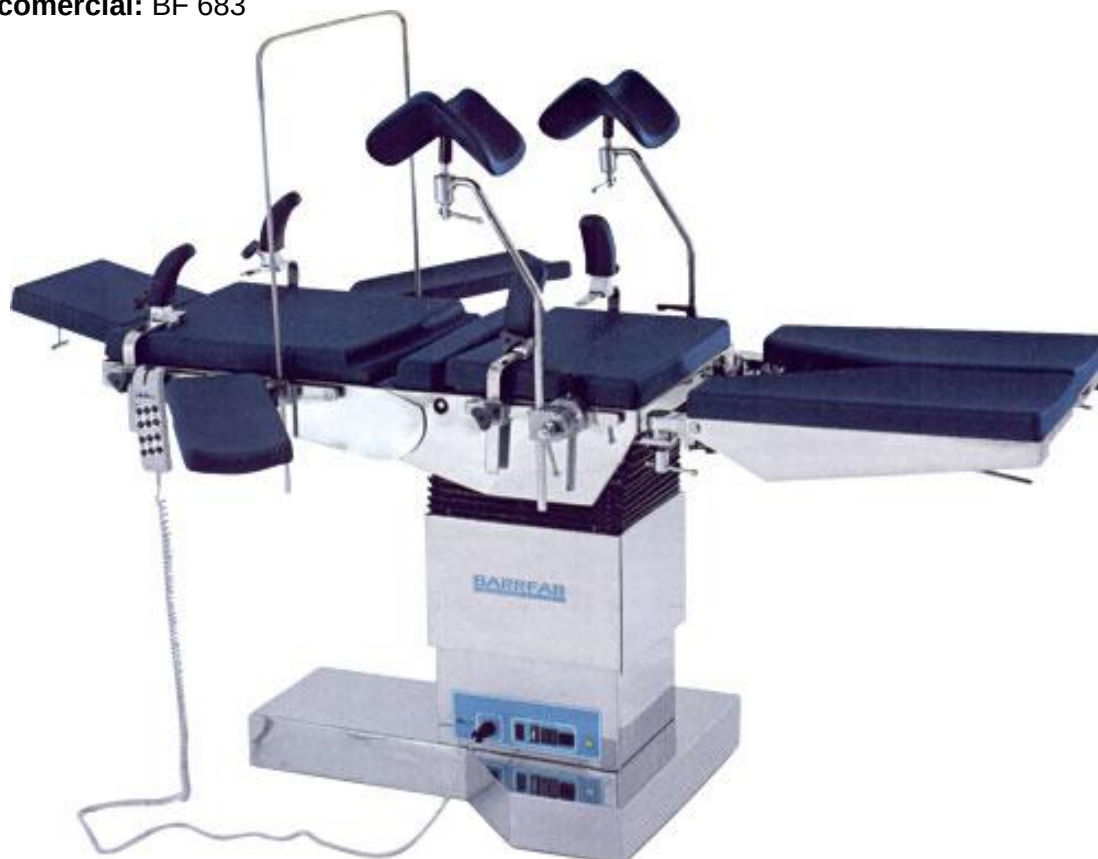

1.2 – Descrição do Produto

O equipamento é constituído de uma estrutura reforçada, pintura resistente e excelente acabamento.

É um equipamento mecânico elétrico de apoio, com partes elétricas, destinado ao uso em Centros Cirúrgicos, Clínicas e Pronto Socorros, o qual permitirá ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com a exigência do procedimento operatório/cirúrgico a ser realizado e melhor acomodamento do cirurgião de acordo com a técnica utilizada. Possui movimentos suaves e de fácil acionamento.

A mesa é articulada e acionada eletricamente, permitindo manter o paciente na posição ideal. O movimento de elevação é através de um sistema Elétrico acionado por controle remoto.

Permite os seguintes movimentos: semiflexão de perna e coxa, flexão abdominal, semi-sentado, sentado, proclive ou reverso de trendelenburg, trendelenburg, para operação de tireóide, Renal, horizontal, Extrema Lordose, litotômica, lateral esquerda e direita, Giro 360°, Deslocamento Longitudinal e Transversal.

Fixação através de rodas retráteis acionadas por sistema elétrico e Pedal.

1.3 - Princípio Físico e fundamentos da tecnologia do produto, aplicados para seu funcionamento e sua ação:

Conjunto Elétrico, com partes elétricas, acionado por um mecanismo elétrico através de controle remoto (Figura 1) ou painel do comando (Figura 2 e 3), para posicionar o paciente em procedimentos cirúrgicos.

Permite movimentos de semiflexão de perna e coxa, flexão abdominal, semi-sentado, sentado, proclive ou reverso de trendelenburg, trendelenburg, para operação de tireóide, Renal, horizontal, Extrema Lordose, litotômica, lateral esquerda e direita, Giro 360°, Deslocamento Longitudinal e Transversal.

Todo conjunto elétrico é alimentado pelo painel de rede (Figura 4).

CONTROLE REMOTO

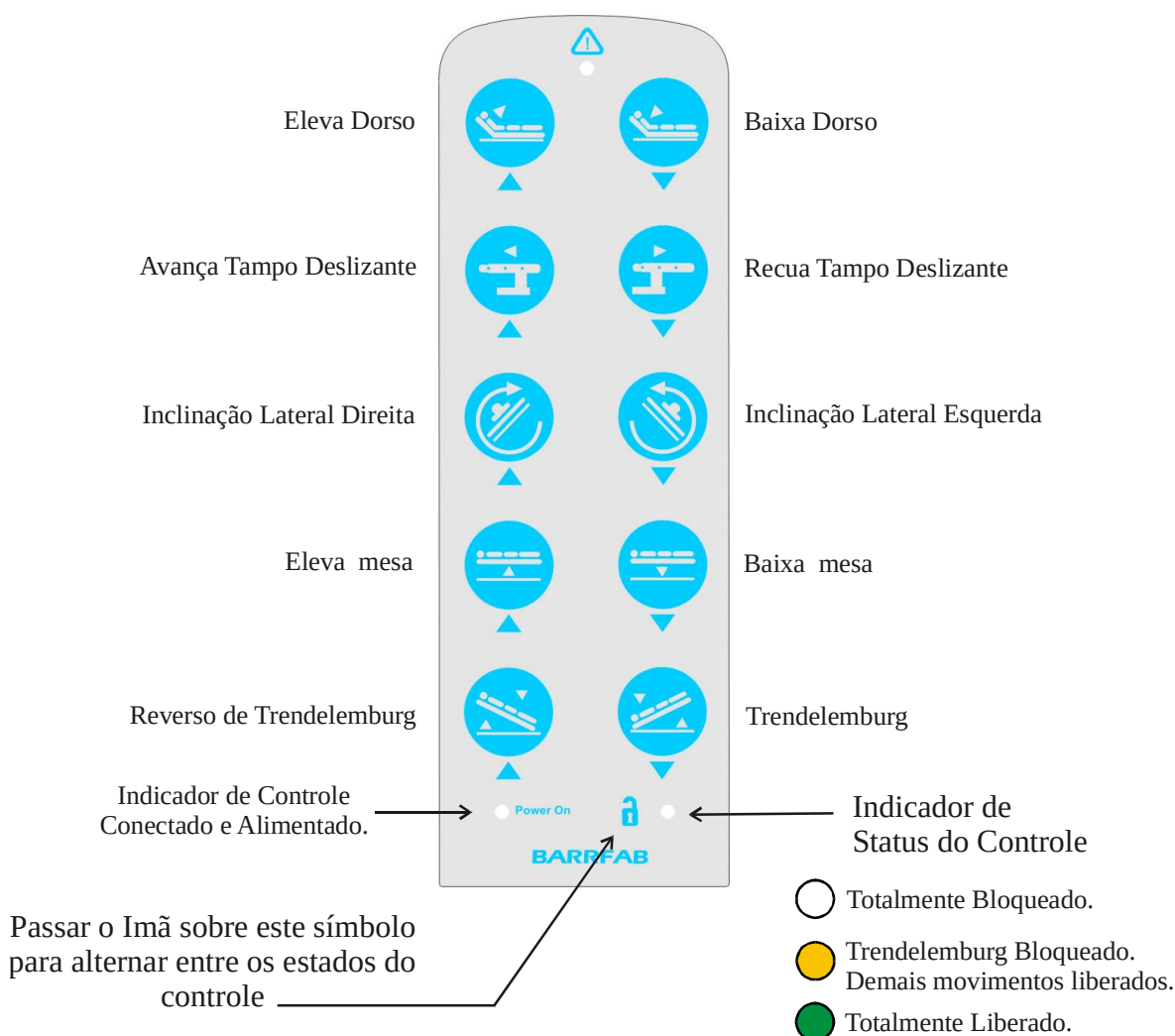


Figura 1

PAINEL DO COMANDO


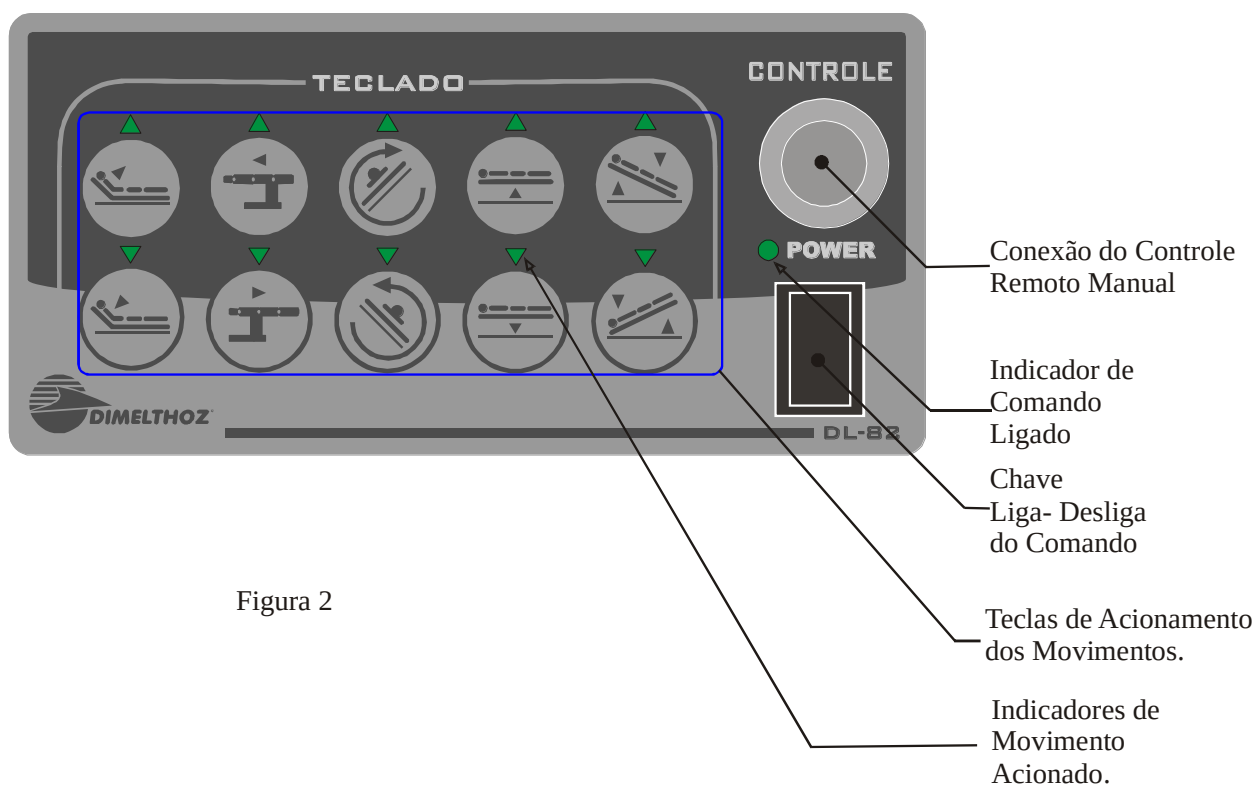


Figura 2

CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO DO COMANDO



Figura 3

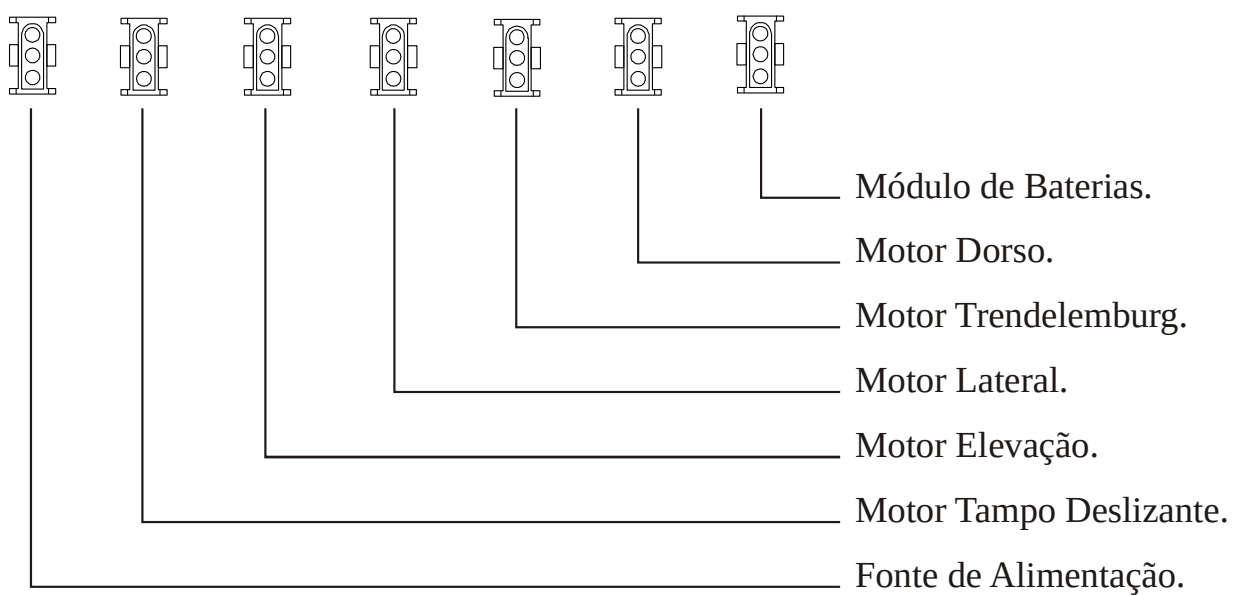

PAINEL DE REDE

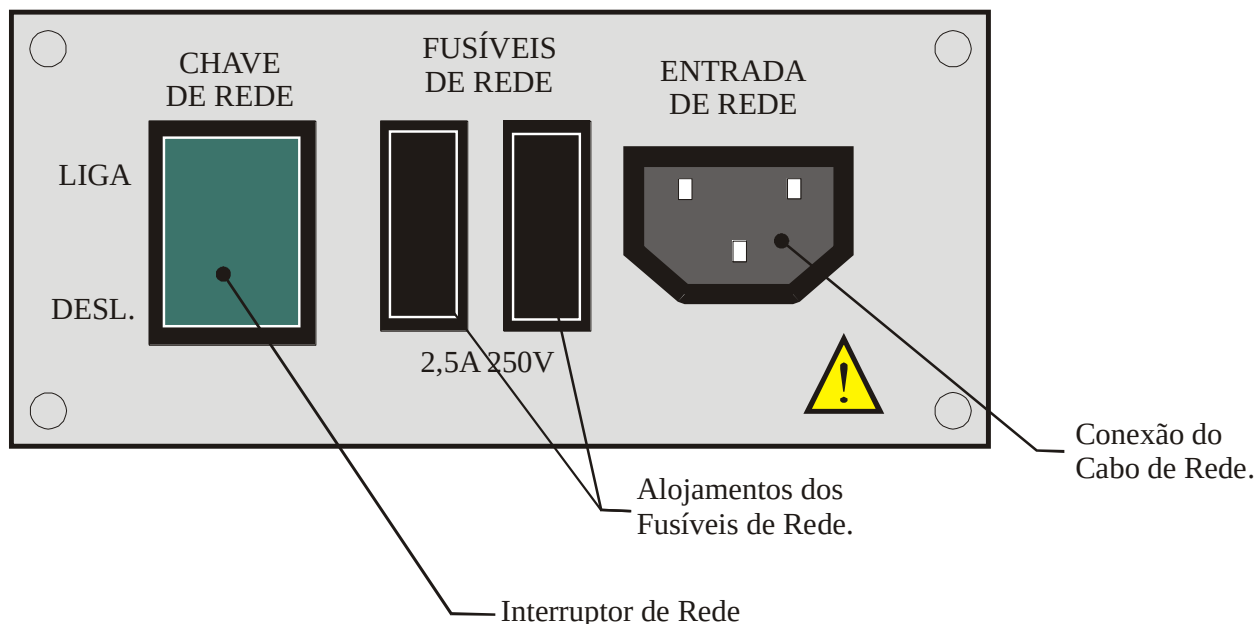


Figura 4

O equipamento BF-683 está de acordo com a Norma Geral para segurança de equipamento eletromédico NBR IEC 60601-1 (1997), com a Norma Colateral de Compatibilidade Eletromagnética NBR IEC 60601-1-2 (1997), e com a Norma Particular para segurança de mesas cirúrgicas NBR IEC 60601-2-46 (2000).

Tampo fabricado em inox, dividido em 05 seções: renal, dorso, cabeça Acionamento Pneumático ou Mecânico (Removível), assento e pernas Inteiras ou Bipartidas acionadas por sistema Pneumático (Removível). Régua em inox para a colocação de acessórios, deslocamento longitudinal esquerda e direita e transversal, radio transparente para uso de intensificador de imagem (arco em C), raios-X e Giro 360°.

Camisa composta por duas partes: Coluna e Chassis.

- Coluna: formada por 04 colunas guia e 04 hastes de aço 1045 com cromo duro retificado. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado a por controle remoto, revestida de aço inoxidável 304.
- Chassis: construído em aço inox 304. Comando de movimentos através de controle remoto a cabo ou infravermelho ou na própria caixa de comando.

Base em T, fabricada em chapa de aço 1020, espessura 6,5mm. Com revestimento de chapa de aço inoxidável 304 ou totalmente inox. Fixação através de rodas retráteis acionadas por sistema elétrico ou Pedal. Sapatas de apoio de borracha.


1.4 – Especificações e Características Elétricas:

- a) Tensão elétrica: 90 a 130 ou 200 a 240 Vca
- b) Freqüência: 49 a 61 Hz
- c) Consumo Máximo: 300W

- d) Motores: atuador linear, classificação III
Proteção IP20 com tampa protetora
Voltagem 24V – DC – Ciclos intermitentes 2/18 minutos
Força – Tração – Carga 6000N
- e) Transformadores: entrada 2 x 110 V
Saída 24V – 4A
- f) Baterias: tipo 2 x 12V – Chumbo – Aço – 7 A/a
- g) Fuzível: 5 A / 250 V - Normal

1.5 - Partes e acessórios acompanhantes:

- 01 - Cabeça do tampo
- 02 - Dorso do tampo
- 03 - Renal do tampo
- 04 - Assento do tampo
- 05 - Pernas do tampo
- 06 - Chassis da camisa
- 07 - Coluna da camisa
- 08 - Base

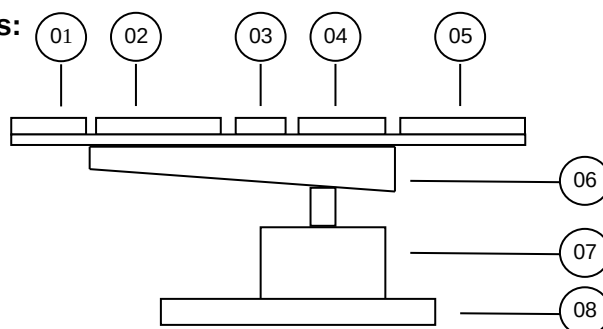

1.6 – Opcionais, materiais de consumo e materiais de apoio

a) Opcionais

- 01 par de portas coxas
- 01 par de suportes laterais
- 01 par de ombreiras
- 01 par de suportes de braços
- 01 arco de narcose
- 01 jogo de colchonetes revestidos em courvim ou injetados em PU
- 01 Bota Pneumática
- 01 Suporte de Crânio para Neuro Cirurgia
- 01 Kit de Ortopedia
- 01 Kit Urologia
- 01 Kit Ginecologia
- 01 Correia para Fixação de Paciente
- 01 Carro de Apoio de Acessórios
- 01 Balança
- 01 Kit Traumatologia
- 01 Bateria duração de 100 movimentos

b) Materiais de Consumo:

Não aplicado

c) Material de apoio:

- Instruções de Uso

Itens de fabricação para uso exclusivo nos produtos da empresa:

Todas as partes e acessórios descritos nesta Instrução de Uso e os demais não descritos, mas pertencentes ao equipamento são de uso exclusivo dos produtos da empresa.

Atenção: O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado ou previsto nestas Instruções de Uso é de inteira responsabilidade do usuário.

1.7 - Especificações e Características Técnicas:

Modelo	BF 683
Classificação do produto segundo a ANVISA	
Classe de risco ANVISA	1 (baixo risco)

Movimentos	- Semiflexão de perna e coxa - Flexão abdominal - Semi-sentado - Sentado - Próclive ou reverso de trendelenburg, - Trendelenburg - Para operação de tireóide - Horizontal - Litotômica, - Inclinação Lateral esquerda - Inclinação Lateral direita - Renal - Extrema Lordose - Deslocamento Longitudinal - Giro da Mesa 360° - Movimentos Lateral Direita - Deslocamento Transversal
Quantidade de pontos de acionamento	05
Capacidade de Movimentos	Pacientes de até 350 Kg
Dimensões do produto	Comprimento: 2,040 mm Largura: 0,55 m Altura: 1,10 m (máx.) / 0,75 m (mín.)
Peso total líquido	200 Kg
Peso total bruto	230 Kg
Número de embalagens	01
Tipo de embalagem	Madeira (totalmente fechada)
Dimensões da embalagem	1,36 m x 1,00 m x 1,00 m (comprimento x altura x largura)

Normas aplicadas ao processo de fabricação do equipamento (principais)

Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos – RDC 59:2000 (ANVISA)

2 - Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

ANTES DA INSTALAÇÃO:

Marcação na Embalagem


As informações referentes aos cuidados a serem tomados durante o transporte e armazenamento do produto são indicadas através de simbologia normalizada diretamente na embalagem.




Símbolo cuidado no transporte e armazenamento (frágil).




Símbolo necessidade de proteção contra umidade no transporte e armazenamento.

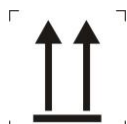

Símbolo de posicionamento de transporte e armazenamento (sentido para cima)

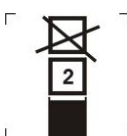

Símbolo de número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre a outra (transporte e armazenamento).
[Máximo = 2 unidades]

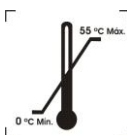

Símbolo de limite de temperatura para armazenamento e transporte.
[0 a 55 °C]

Armazenamento:

- Manter em local protegido de chuva e sol direto, e em sua embalagem original.
- No caso de armazenamento de diversas caixas do equipamento embalado, o empilhamento máximo deverá ser conforme indicado no símbolo de empilhamento na embalagem (máximo 2 unidades).

Transporte:

- Durante o transporte evite vibrações e impactos no equipamento
- Não deixe cair no chão.
- No caso de transporte de diversas caixas do equipamento embalado, o empilhamento máximo deverá ser conforme indicado no símbolo de empilhamento na embalagem (máximo 2 unidades).
- Durante o transporte, verifique as condições ambientais conforme tabela abaixo:

Condições ambientais de transporte ou armazenamento	
Faixa de temperatura ambiente de transporte ou armazenamento	0°C a +55°C
Faixa de umidade relativa de transporte ou armazenamento	0% a 90% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	500hPa a 1060 hPa (375 mmHg a 795 mmHg)

APÓS A INSTALAÇÃO:

Acondicionamento:

- Manter em local protegido de chuva e sol direto.
- Verifique as condições ambientais conforme tabela abaixo:

Condições ambientais de acondicionamento (entre as operações)	
Faixa de temperatura ambiente de acondicionamento	+5°C a +45°C
Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Barrfab	+15°C a +30°C
Faixa de umidade relativa de acondicionamento	30% a 75% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg)

Conservação:

- Quando em uso, limpar com pano úmido e sabão nos colchonetes e álcool nas demais partes, inclusive no controle remoto.
- Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização.
- Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento.
- Não utilize solventes orgânicos como thinner para limpar o equipamento.
- Mantenha o equipamento em local limpo, longe de poeiras.

Nota: Veja item 8 – *Procedimentos Adicionais para Reutilização* e item 9 – *Procedimentos Adicionais Antes da Utilização do Produto*.

Operação:

- Durante o uso, verifique as condições ambientais conforme tabela abaixo:

Condições ambientais de operação	
Faixa de temperatura ambiente de funcionamento	+10°C a +35°C
Faixa de temperatura ambiente recomendada pela Barrfab	+21°C a +26°C
Faixa de umidade relativa de funcionamento	30% a 75% (não condensante)
Faixa de pressão atmosférica	700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg a 795 mmHg)


3 - Instruções para uso do produto**a) Posicionando o equipamento**

- ✓ Posicione a mesa cirúrgica no local desejado;
- ✓ Conecte a mesa com a rede elétrica; observe que ela é de comutação automática de faixas de tensão;
- ✓ Acione a chave liga/desliga;
- ✓ Baixe e retraia os rodízios, se os mesmos forem elétricos, ou no pedal, se forem mecânicos, para fixar a mesa no local desejado;
- ✓ Acione os movimentos através do controle remoto, verificando se os mesmos estão de acordo com o desenho abaixo.

b) Posicionando o paciente

Conforme orientação médica, o paciente poderá ser posicionado nas seguintes posições:

Nota: Para posicionar o paciente, utilize o controle remoto.

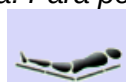

Flexão Abdominal



Próclive ou Reverso de Trendelenburg



Semi-Flexão da Perna e Coxa



Trendelenburg



Para Operação da Tireóide



Litotômica





Extrema Lordose



Semi-sentado



Renal

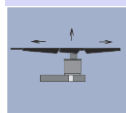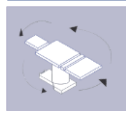	Horizontal
	Sentado
	Deslocamento Longitudinal
	Giro da Mesa 360º
	Movimentos Baixo e para Cima
	Inclinação Lateral Esquerdo
	Inclinação Lateral Direita
	Transversal

4 - Advertências e/ou precauções a serem adotadas

a) Advertências e/ou precauções durante o transporte e armazenamento

Não transportar a mesa deitada;

Por ser um produto frágil, devem-se tomar os cuidados para não deixá-lo cair no chão.

b) Advertências e/ou precauções durante a instalação

A instalação deverá ser realizada exclusivamente por um técnico autorizado (credenciado pela Barrfab).

c) Advertências e/ou precauções durante a utilização

Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoal adequadamente treinado e sob a direção de equipe médica qualificada, familiarizada com os riscos e benefícios atualmente conhecidos da utilização de Mesas Cirúrgicas.

Cuidados com relação ao posicionamento do paciente sobre o tampo dos equipamentos

Antes do procedimento cirúrgico, acione os rodízios através do pedal fixando a mesa no chão.

d) Advertências e/ou precauções durante a limpeza

Mantenha o equipamento limpo e desinfetado para a próxima utilização.

Não utilizar outros produtos químicos na limpeza, que não seja álcool na parte metálica e, água e sabão nas demais partes.

Não permita que líquidos sejam inseridos no equipamento.

Para o controle remoto, a limpeza deve ser feita com álcool etílico.



5 – Desempenho do Produto

5.1 - Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto

Indicação...: Clínicas, consultórios e hospitais.

Finalidade...: Usadas como suporte de pacientes nas seguintes condições:

- Indução de anestesia,
- Operação,
- Recuperação de anestésias

Projetada para uso em pequenas, médias e altas cirurgias, possibilitando o seu uso por longos períodos sem comprometimento do posicionamento determinado.

5.2 - Efeitos secundários ou colaterais indesejáveis e contra-indicações

Contra indicado para pessoas acima de 350 Kg.

5.3 - Segurança e eficácia do produto:

Este equipamento é totalmente seguro e eficaz, pois além de ser somente um produto auxiliar (apoio do paciente), foi projetado e fabricado com materiais padrões (não tóxicos e não inflamáveis) de uso médico (aço, poliestireno, acrílico, inox, etc.) e montado de forma tradicional (parafusos) e Soldas.

Desde que mantidos (armazenados) e conservados conforme mencionados no item 2 desta Instrução de Uso, o equipamento não perderá ou alterará suas característica físicas e dimensionais.

6 – Instalação ou Conexão a Outros Produtos

O equipamento não tem como finalidade ou uso, a conexão direta com outros equipamentos. Somente é possível a instalação de acessórios e opcionais fabricados pela Barrfab.

7 – Instalação, Manutenção Corretiva e Preventiva

7.1 – Instalação do Produto

A instalação deverá ser realizada exclusivamente por técnico autorizado (credenciado pela Barrfab).

Transportar o equipamento, na embalagem, até o local de instalação;

Desprender as laterais e o tampo da caixa;

Retirar o grampo fixador da mesa, soltando o parafuso;

Colocar o equipamento no local apropriado;

Instalar os acessórios e opcionais adquiridos.

7.2 - Manutenção Corretiva:

Quando ocorrer danos em uma ou mais partes do equipamento, segregue-o e identifique com uma etiqueta que o mesmo está “em manutenção”, para evitar o uso indevido.

PROBLEMA	CAUSA
Movimento paralisado	Verifique a existência de fusível queimado ou mal conectado. <i>Nota: verificação exclusiva pela assistência técnica autorizada ou Técnico em Elétrico Eletrônico.</i>

NOTA: Para qualquer problema apresentado, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada, cujos telefones e endereços podem ser obtidos através do site www.barrfab.com.br



ou através do atendimento ao cliente na fábrica através do telefone: (54) 3229-6774 e Fax: (54) 3229-8645.

Caso seja necessário o envio do equipamento para Assistência Técnica Autorizada da Fábrica, encaminhe o equipamento para o seguinte endereço:

Barrfab Indústria e Comércio Ltda.
Rua Desembargador José Bernardo de Medeiros Júnior, 1390 Bairro De Lazzer
CEP: 95055-570, Caxias do Sul – RS
CNPJ 02.836.248/0001-12 Inscr. Est. 029/0330912

Nota: Ao enviar o equipamento, envie também um descritivo do problema assim como cópia da Nota Fiscal.

7.3 - Manutenção Preventiva e Conservação:

A manutenção Preventiva deverá ser feita a cada 6 meses, com o objetivo de verificar o funcionamento do equipamento, tal como o deslizamento dos rodízios, o desgaste dos mancais e colunas, etc..

A Manutenção Preventiva deverá ser realizada exclusivamente pela Assistência Técnica Autorizada, devendo para isso ser solicitada conforme informado no item (manutenção corretiva) desta Instrução de Uso.

Para conservação, mantenha o equipamento limpo, desinfetado e acondicionado conforme item 8 abaixo.

8 – Procedimentos Adicionais para Reutilização

8.1 - Limpeza

Nas partes metálicas proceder a limpeza com álcool;

Nas partes dos colchonetes proceder a limpeza com água e sabão;

Não utilizar outros produtos químicos na limpeza para evitar riscos de corrosão ou manchas no inox;

Após a limpeza deve-se fazer a desinfecção do equipamento.

8.2 – Limpeza do controle remoto

Deve ser feita com álcool etílico.

8.3 - Desinfecção

Realiza-se a assepsia habitual acrescida de um germicida ou produto desinfetante de largo espectro, tomando-se o cuidado de não deixar resíduos que possam provocar qualquer ação tóxica ao entrar em contato com o paciente.

Emprego de desinfetantes à base de álcool:

Os desinfetantes podem ser adquiridos no mercado com as mais diversas concentrações.

Outros desinfetantes podem ser utilizados tais como:

Nota: Os valores indicados são valores máximos, que não devem ser ultrapassados!

Produto	Diluição
Etanol a 96%	= máx. 40 g / 100 g de desinfetante
Propanol	= máx. 35 g / 100 g de desinfetante
Dialdeído glutárico a 25%	= máx. 75 mg / 100 g de desinfetante
Etiltexanal	= máx. 10 mg / 100 g de desinfetante
Solução de formaldeído	= máx. 10 mg / 100 g de desinfetante
Glioxal	= máx. 165 mg / 100 g de desinfetante
Hipoclorito de sódio	= máx. 50 mg / 100 g de desinfetante



A Barrfab não se responsabiliza pela utilização de preparados cujos componentes diferem das nossas indicações.

8.4 - Acondicionamento

Acondicionar o equipamento em local limpo e seco (protegido da chuva ou de umidade excessiva).

9 – Procedimentos Adicionais Antes da Utilização do Produto

Instalar o equipamento conforme descrito no item 7.

Mesmo na primeira utilização, o equipamento deverá ser limpo e desinfetado, devendo seguir os mesmos procedimentos adicionais para reutilização, conforme descrito no item 8 desta Instrução de Uso.

10 – Precauções em Caso de Alteração do Funcionamento do Produto

Caso o equipamento apresente qualquer anormalidade, verifique se o problema pode ser resolvido pelo próprio usuário, caso este problema não envolva o uso de ferramentas. Se não for possível solucionar o problema, solicite a assistência técnica autorizada. Neste caso, solicite os serviços da assistência técnica autorizada através do site <http://www.barrfab.com.br> ou através do atendimento ao cliente na fábrica pelo telefone: (54) 3229-6774 ou Fax: (54) 3229-8645.

11 – Sensibilidade a Condições Ambientais Previsíveis nas Situações Normais de Uso

Este equipamento foi projetado para não ser sensível a interferências como campos magnéticos, influências elétricas externas, descargas eletrostáticas, a pressão ou variação de pressão.

Verifique as condições apropriadas no item 2 - Condições especiais de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:

12 – Precauções em Caso de Inutilização do Produto

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido deste equipamento, quando o mesmo for inutilizado, este deve ser segregado, embalado, identificado e enviado (por conta e risco do cliente) para a fábrica Barrfab para fazer o seu devido descarte com segurança.

13 – Termo de Garantia

1. INSTALAÇÃO E DO USO

- A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como, as condições de trabalho, devem atender às Normas da BARRFAB constantes nesta Instrução de Uso. Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.

2. COBERTURA

- A garantia, sem qualquer ônus ao usuário adquirente, é limitada à substituição e/ou conserto de eventuais peças defeituosas ou à correção de qualquer defeito de produção, mediante constatação do nosso Departamento de Assistência Técnica.
- A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica em caso de imperícia ou negligências na utilização do equipamento, ou ainda, que tenham sido reparadas ou modificadas por pessoas não credenciadas pela BARRFAB.
- Em nenhuma hipótese, caso ocorra a necessidade de substituição de qualquer componente coberto por este Termo, o período de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais suplementares do componente substituído.

3. LOCAL DA GARANTIA

- O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da BARRFAB (Assistência Técnica Autorizada), ou credenciado pela mesma.



-
- Quando constatado que o reparo do equipamento se faça necessário somente nas instalações da fábrica ou em Assistências Técnicas autorizadas, o frete do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário.
4. PRAZOS
- Inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda da BARRFAB ou seus revendedores, pelo prazo de 12 meses.
5. RESPONSABILIDADE
- A responsabilidade da BARRFAB é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes, excetuando-se da garantia eventuais prejuízos por lucros cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou imediatos.

OBS.: A presente garantia só é válida juntamente com a Nota Fiscal

14 – Termo de Responsabilidade

A empresa **Barrfab Indústria e Comércio Ltda.**, representada por seu Responsável Técnico Antonio Paulo Nodari e por seu Representante Legal Arion José Barretti, abaixo assinados, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que todas as informações prestadas referente ao produto Mesa Cirúrgica para Pequena, Média e Alta Cirurgia, Parto e Obstetrícia, Ortopedia modelo BF 683, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.

Caxias do Sul, 29 de junho de 2006

Responsável Técnico
Antonio Paulo Nodari
CREA-RS 32375

Representante Legal
Arion José Barretti
Barrfab Indústria e Comércio Ltda.